

000/0090.070/30

Oogmagneet met loep

De oogmagneet/nylonlus met loep laat u toe om oppervlakkige onzuiverheden en (metaal)splinters uit het oog te verwijderen.


Eigenschappen


- Afmetingen: Lengte 145 mm (met uigeschroefde lus/pen: 163 mm).
- Roestvrij staal.
- 1 Verstelbare glazen loep.
- 1 Magneetpen voor metalen deeltjes.
- 1 Nylonlus.
- Magneetpen en Nylonlus kunnen in het centrale deel in/uitgeschroefd worden.
- CE gekeurd.

Gebruik

- Schroef de nylonlus of magnetische pen uit de houder afhankelijk van het soort vuiltje dat uit het oog moet verwijderd worden.
- Zoek het deeltje in het oog met behulp van het vergrootglas.
- Gebruik de magneetpen voor metalen deeltjes.
- Gebruik de nylonlus voor andere stoffen.
- De nylonlus kan eveneens gebruikt worden om het deeltje te verplaatsen zodanig dat het gemakkelijk kan verwijderd worden met de magneetpen.

- Mag slechts gebruikt worden voor oppervlakkige vuiltjes in het oog.
- Niets forceren indien het vuiltje niet makkelijk meekomt.
- In dergelijke gevallen steeds een oogarts contacteren.
- Het is aan te raden om nadien het oog te spoelen met oogspoelmiddel.
- Gebruik eventueel een oogkompres.
- Raadpleeg een arts/oogarts.

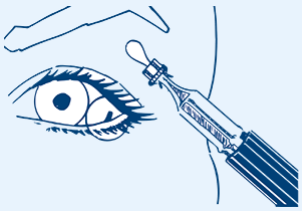

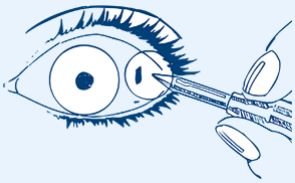

Inhoud

- Inhoud.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar mits de onderdelen intact zijn.
- Na gebruik reinigen met een ontsmettend middel et de gebruikte uiteinden terug in het centrale gedeelte schroeven.

De oogmagneet met loep is een medisch hulpmiddel.

Versie: 12/11/2026