

000/0080.041/20

Contusio Duopatch

De warmtepleister Contusio Duopatch zorgt voor een aangename warmte gedurende ca. 8 uur en voor pijnverlichting bij gespannen spieren, vermoeidheid, artritis en menstruatiepijn. Contusio Duopatch werd dermatologisch getest en kan onopvallend onder de kledij gedragen worden.

Dubbele patch, betere kleefkracht.


MExT
First Medic

Eigenschappen

- Gunstige effecten van warmte: stimuleert bloedcirculatie. Door de warmte verwijden de bloedvaten, wat de bloedcirculatie verbetert. Hierdoor verhoogt de toevoer van zuurstof en essentiële voedingsstoffen naar de spierweefselcellen.
- Verbetert de eliminatie van secundaire metabolieten: het afvalmateriaal geproduceerd door de celweefsels en spieren wordt makkelijker afgevoerd door een betere doorbloeding.
- Verlicht pijn: warmte vermindert spanning, ontspant en verbetert de beweeglijkheid.

Gebruik

- Reinig en droog de te behandelen huid zorgvuldig.
- Verwijder de beschermfolie voor gebruik.
- Plaats de pleister op de pijnlijke huid.
- Zorg ervoor dat de volledige patch goed op de huid hecht. (Het kan ongeveer 30 minuten duren tot de gewenste temperatuur bereikt wordt.)
- Draag de pleister minstens 8 uur.
- De pleister mag zichzelf niet overlappen (bijvoorbeeld rond de pols).
- Bij menstruatiepijn: plaats de pleister met de kleefzijde op het ondergoed en niet rechtstreeks op de huid.
- Controleer of de pleister perfect blijft kleven.

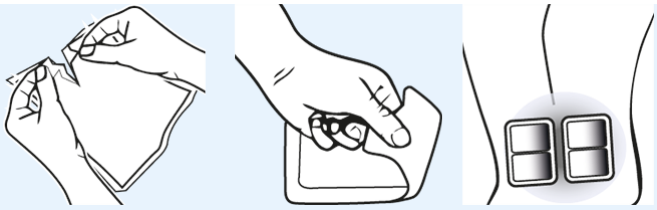

Inhoud

Doos 6 stuks

Bewaring

- 60 maanden na productiedatum
- individueel product: zie verpakking

  Bewaren op een droge plaats, in gesloten verpakking, niet in direct zonlicht.

Contusio Duopatch is een medisch hulpmiddel.

Versie: 12/11/2026